


Protokollierungs- und Dokumentationssoftware

Betrachten Sie Fluss-, Druck und Volumenmessungen bequem auf dem Monitor Ihres Rechners, während gleichzeitig die Atemparameter gespeichert werden. FlowLab stellt Ihre Messergebnisse grafisch als Echtzeitkurven oder numerisch dar. Generieren Sie Trendreports von bis zu 100 Stunden, um die langfristige Funktionalität des Beatmungsgeräts zu verifizieren. Zur Vereinfachung des Gerätemanagements können Test Reports auch elektronisch erstellt und gespeichert bzw. ausgedruckt werden.

« Softwarepaket für Echtzeitkurven,
100-Stunden-Trends und
individualisierte Protokollierung. »

Analyser

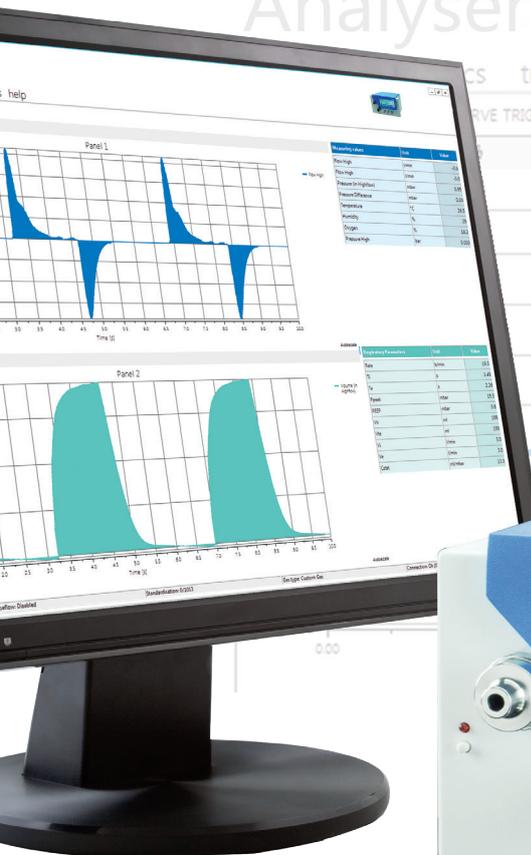


Prüfbericht

- Ausdrucken von Prüfberichten mit nur einem Klick
- Benutzerdefinierte Konfiguration
- Eingabemöglichkeit für Logos
- Automatischer Abruf der FlowAnalyser-Daten
- Verschiedene Eingabeoptionen für jedes untersuchte Beatmungsgerät
- Eindeutige Kontrollnummer für jeden Bericht




Echtzeit-Kurven

- Anzeige als Funktion der Zeit oder als Schleife
- Kurvenmessung mit verschiedenen Cursors
- Einzigartiger Trigger zur Anzeige der Echtzeitkurven im Modus Einmal, Norm oder Auto
- Layout und Farben vom Benutzer definierbar
- Titeingabe, Ausdrucken und Speichern möglich
- Gleichzeitige Darstellung von maximal 6 verschiedenen Messkurven

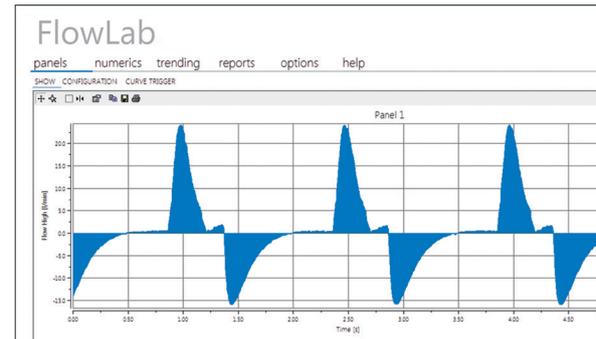


Trending

- Automatische Messdatenerfassung bis zu 100 Stunden
- Benutzerdefiniertes Trendintervall
- Bis zu 10 Werte gleichzeitig
- Datenexport nach Excel usw.
- Layout und Farben vom Benutzer definierbar
- Titeingabe, Ausdrucken und Speichern möglich
- Automatische Berechnung der Dateigrösse

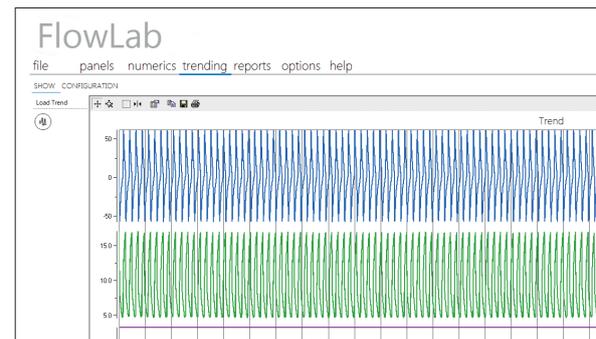

Zahlen

- Anzeige aller Messwerte auf einer Seite oder kombiniert mit Echtzeit-Kurven
- Layout und Farben vom Benutzer definierbar
- Statistische Auswertung u. a. mit Mittelwert, Maximum und Minimum für jeden Parameter
- Eingabe von Zielwerten mit Toleranzbereich
- Erfolgreich/Fehler automatisch verifiziert
- Es können bis zu 20 Werte gleichzeitig dargestellt werden

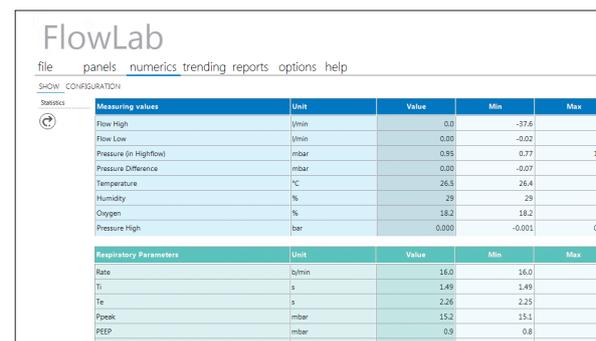

Sprachen

- Erhältlich in 15 Sprachen
- Alle Sprachen mitgeliefert – kostenlos
- Sprachen aller Kontinente