

CITREX H5 Test-Set

Das beste mobile Testgerät seiner Klasse

analyser
the art of measuring


Komplettes Test-Set für anspruchsvolle Einsätze

Mit dem Test-Set CITREX H5 sind Sie hervorragend ausgerüstet für den täglichen Einsatz vor Ort. Das umfangreiche Zubehör beinhaltet alle Teile, welche für eine genaue Messung erforderlich sind. Mit dem hoch-genauen Messgerät CITREX H5 haben Sie die optimale Lösung um Ihre fluss- und druckerzeugende Geräte in kürzester Zeit zu überprüfen oder zu kalibrieren. Der 4.3" grosse und hochauflösende Multi-Touch Bildschirm stellt die Messresultate übersichtlich nach Ihren Bedürfnissen dar und lässt sich intuitiv bedienen.




CITREX H5

Das CITREX H5 ist durch seine kompakte Bauweise ideal für den mobilen Einsatz. In höchster Präzision misst es in bidirektionaler Richtung unter anderem den Gasfluss, den Druck, die Temperatur und die Sauerstoffkonzentration von unterschiedlichen Gas Typen. Auf dem grossen Multi-Touch Bildschirm können die Parameter einfach in zahlen- oder kurvenform dargestellt werden. Ausserdem lassen sich alle Ansichten individuell konfigurieren.

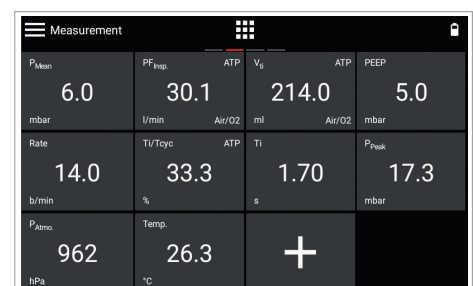

FlowLab

Mit der ebenfalls im Test-Set enthaltenen FlowLab Software analysieren und protokollieren Sie sämtliche Parameter im Detail. Hochauflösende Echtzeitkurven, Trending-Möglichkeiten und erweiterte Protokollfunktionen in Excel machen es für Expertinnen und Experten unentbehrlich.

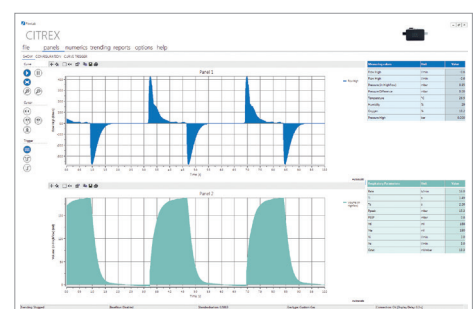

Sensoren

Mit dem CITREX H5 können Sie mit 17 verschiedene Gas-Standards und 8 unterschiedlichen Gas-Typen arbeiten. Das Messgerät kalkuliert und erfasst sämtliche relevanten Beatmungsparameter, welche einfach auf ein Speichermedium gespeichert oder über eine der vielen Schnittstellen ausgelesen werden können. Der zusätzliche Differenzdruck-Anschluss mit einem Messbereich von ± 200 mbar und der Hochdruck-Anschluss mit einem Bereich von -1–10bar ermöglichen zudem höchst präzise Druckmessungen ausserhalb des Flussmesskanals.



Das CITREX H5 Test-Set enthält:

- CITREX H5
- SmartLung Adult (1L)
- CITREX Webserver Konfigurator und Monitoring
- FlowLab Software
- Sauerstoffsensor
- Adapter-Set
- Einlaufstrecke
- USB Auto Adapter
- Micro SD Karte
- Bakterienfilter
- USB Kabel
- Netzwerkkabel
- Steckernetzteil
- Transporttasche
- Akku
- USB Adapter
- Kurzanleitung
- CITREX H5 Protector



Bestellnummer: 304.555.000



CITREX H5 Test Set ist ideal zum Testen und Verifizieren von:

- CPAP und BiLevel Beatmungsgeräte
- Intensiv-Beatmungsgeräten
- Hochfrequenzbeatmungsgeräten
- Blutdruck-Messgeräten
- Sauerstoffkonzentratoren
- Spirometern
- CO₂-Insufflatoren
- Medizinische Gasversorgungen



IMT.Analytics

IMT Analytics AG . Gewerbestrasse 8 . 9470 Buchs . Switzerland
T +41 81 750 67 10 . www.imtanalytics.com